




CREATE IT.

www.nsk-inc.com


DEUTSCH
REF PR-D1044DEv2 20.04.NEU


TIP GUIDE

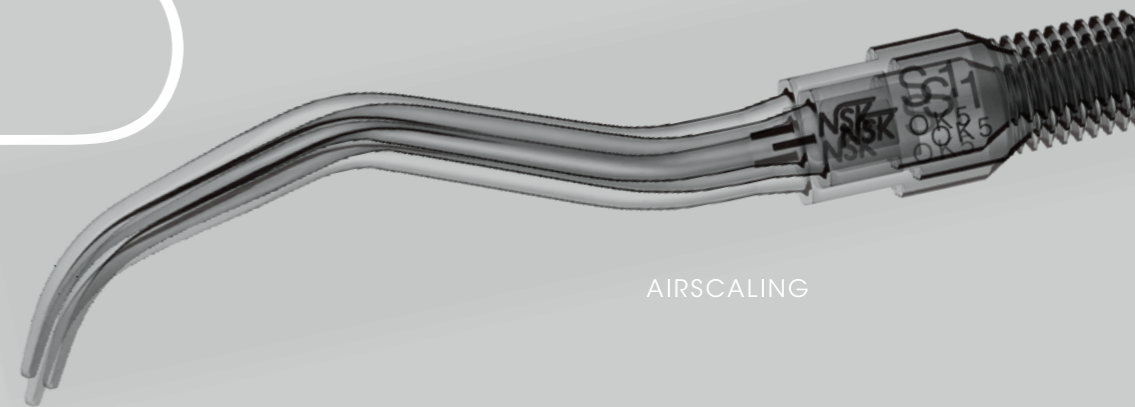

AIRSCALING


Eine Auswahl
an Spitzen
für jeden Bedarf

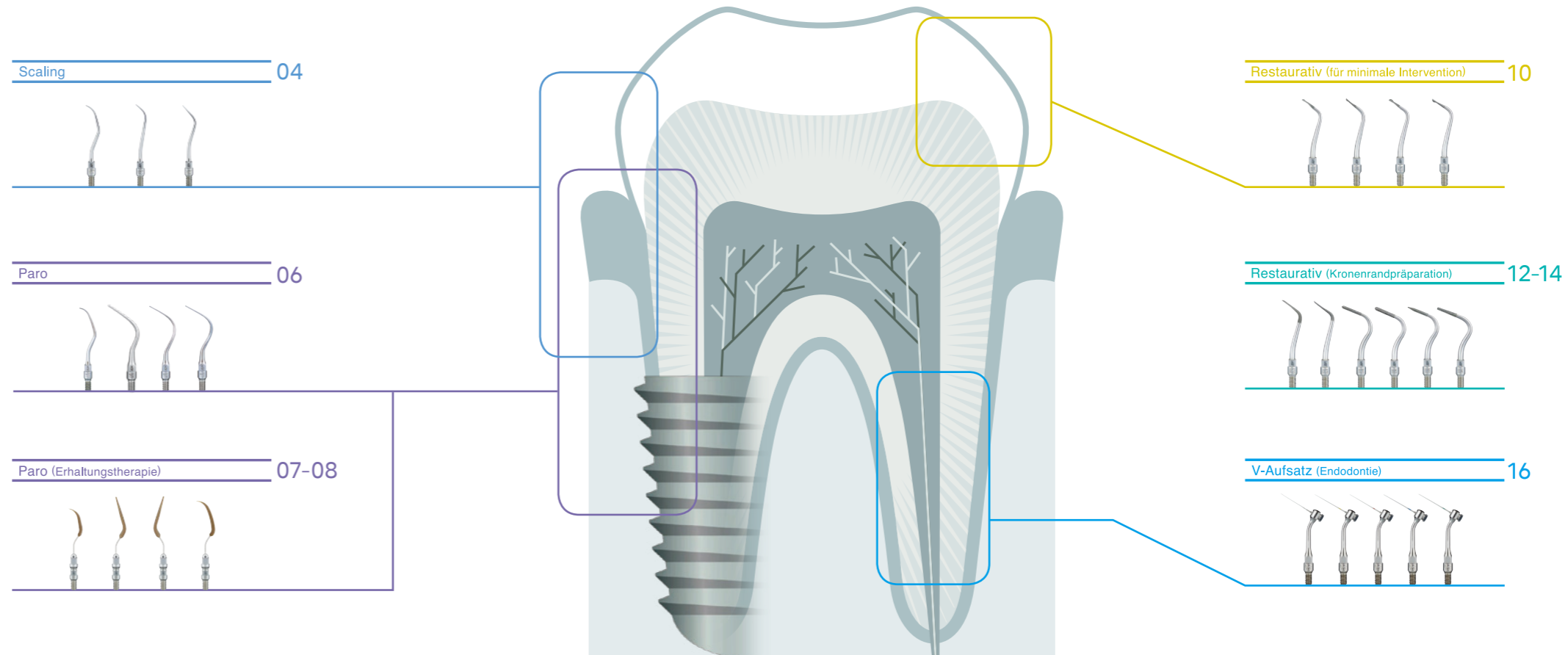

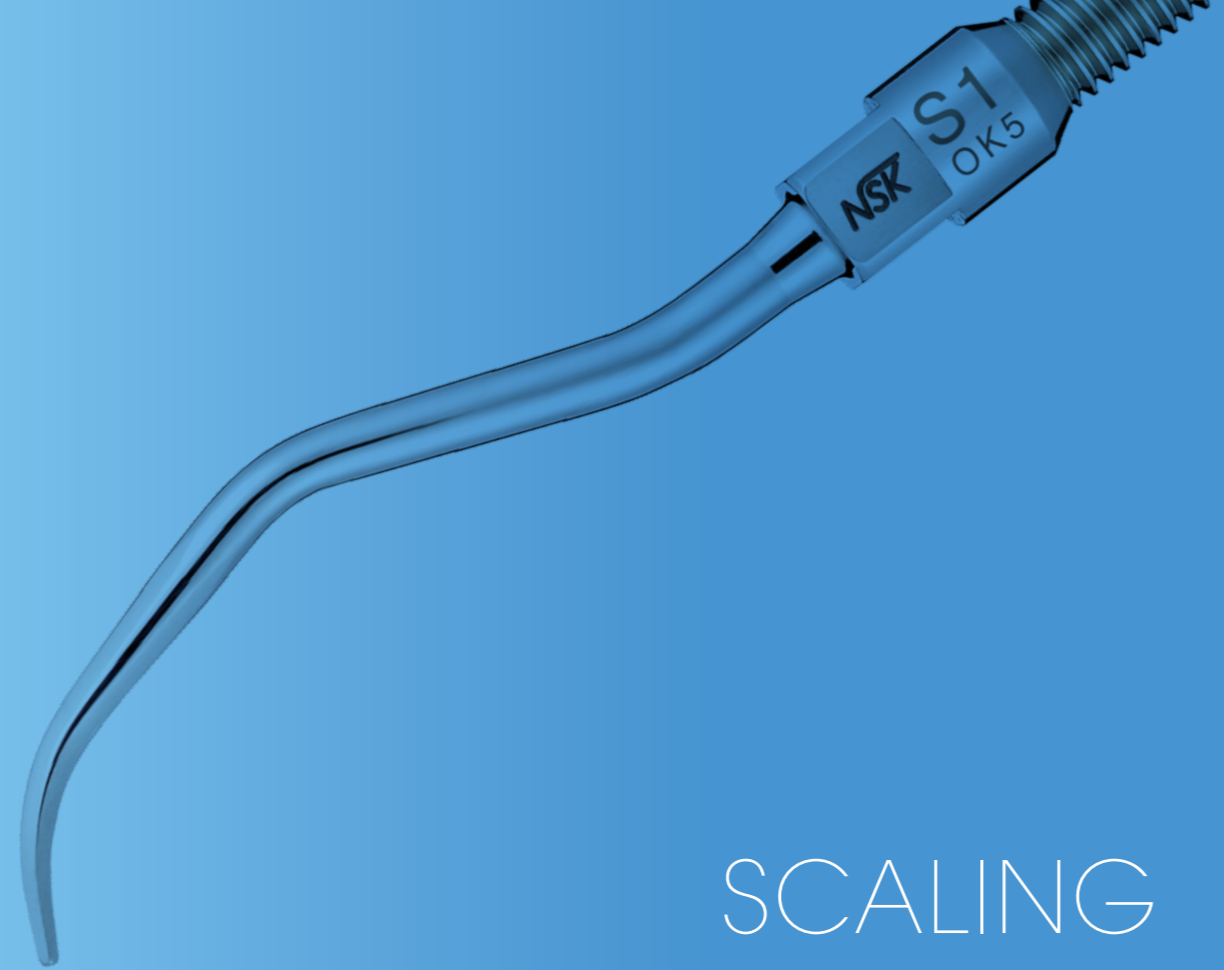



SCALING

SCALING

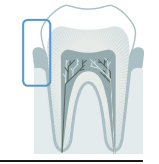

MODELL S1

- Entfernung von supragingivalem Zahnstein
- Entfernung von Zahnstein an der marginalen Gingiva

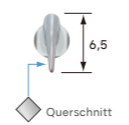
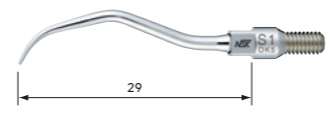


BESTELL CODE **Z252411**

• Aufsatz Universal

MODELL S2

Entfernung von supragingivalem Zahnstein

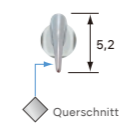
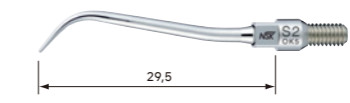


BESTELL CODE **Z252413**

• Aufsatz Sichel


MODELL S3


- Entfernung von supragingivalem Zahnstein
- Entfernung von Zahnstein an der marginalen Gingiva

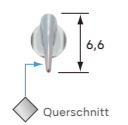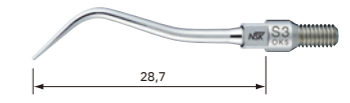

BESTELL CODE **Z252412**

• Aufsatz Para

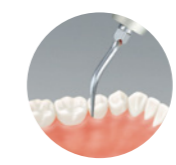

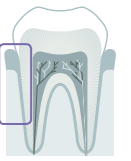



PARO



PARO

MODELL S10

- Entfernung von subgingivalem Zahnstein und Biofilm
- Entfernung von Zahnstein in engen Zahnzwischenräumen

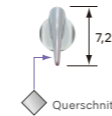
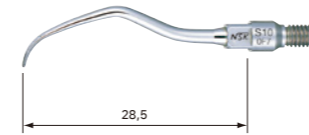


BESTELL CODE **Z252420**

• Universal-dünn slim line

MODELL S20

- Entfernung von subgingivalem Zahnstein und Biofilm
- Entfernung von subgingivalem und Biofilm

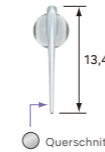
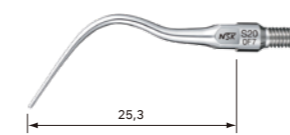


BESTELL CODE **Z252441**

• für Wurzelglättung (lang, gerade)

MODELL S21R

- Entfernung von subgingivalem Zahnstein und Biofilm
- Entfernung von Zahnstein in engen Zahnzwischenräumen
- Entfernung von subgingivalem und Biofilm

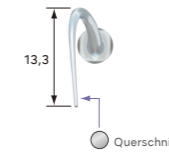
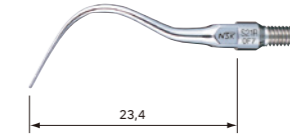


BESTELL CODE **Z252442**

• für Wurzelglättung (lang, rechts)

MODELL S21L

- Entfernung von subgingivalem Zahnstein und Biofilm
- Entfernung von Zahnstein in engen Zahnzwischenräumen
- Entfernung von subgingivalem und Biofilm

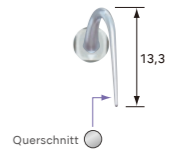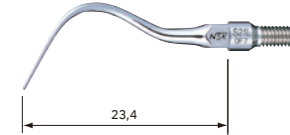

BESTELL CODE **Z252443**


• für Wurzelglättung (lang, links)



PARO (Erhaltungstherapie)


Für die Reinigung von Prothesen und implantatgestützten Prothesen.

Diese Aufsätze bestehen aus einem speziellen Material, welches Prothesen und restaurative Materialien nicht beschädigt.

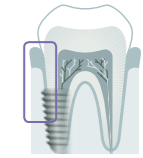

MODELL V-P10

V-P10 dient der Reinigung und Erhaltung von Prothesen. Form und Krümmung bieten einfachen Zugang in alle Bereiche.

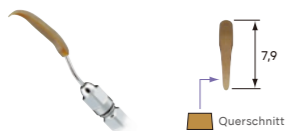


BESTELL CODE **Y900184**

• Packung à 3 St.
*S35-Aufsatzhalter nicht enthalten



MODELL V-P11R

V-P11R/L für links und rechts ist eine doppelt gekrümmte Spitze. Diese Spitze ist extra lang für den Zugriff auf schwer zugängliche Bereiche und zur Vermeidung einer Beeinträchtigung angrenzender Zähne oder Konturen. Ihre Form wurde für die optimale Anpassung an unterschiedliche Zahnmorphologien konzipiert, was sie zu einer vielseitigen Spitze für einen breiten Anwendungsbereich von Frontzähnen bis zu Prämolaren macht.

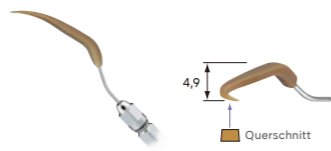

BESTELL CODE **Y1002165**

• Rechts gebogene Spitze • Packung à 3 St.
*S35-Aufsatzhalter nicht enthalten



MODELL V-P11L




BESTELL CODE **Y1002166**

• Links gebogene Spitze • Packung à 3 St.
*S35-Aufsatzhalter nicht enthalten

MODELL V-P12

V-P12 ist die längere Version des beliebten V-P10 Aufsatzes. Dadurch bietet dieser Aufsatz ein breites Einsatzspektrum.

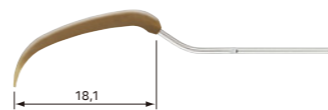


BESTELL CODE **Y1002167**

• Links gebogene Spitze • Packung à 3 St.
*S35-Aufsatzhalter nicht enthalten



MODELL S35


V-Aufsatz-Halter

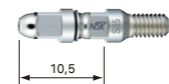

BESTELL CODE **Z252015**

• beinhaltet Schlüssel zum Wechseln der Aufsätze
*Kunststoff-Aufsatz in Lieferung nicht enthalten.

MODELL Perio-Control Aufsatzset für Airscaler

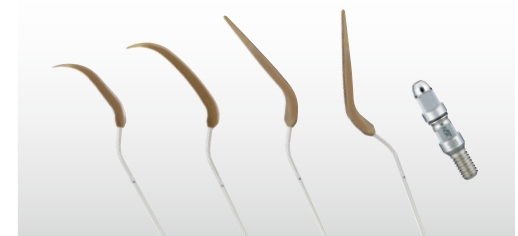


BESTELL CODE **Y1002754**

• 1x S35-Halter
• 1 Stück Wechselschlüssel E-Aufsatz
• V-P10, V-P11R, V-P11L, V-P12 : je 1 Stk.

RESTAURATIV



RESTAURATIV (Für Minimale Intervention)

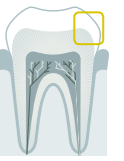






MODELL **S65D**

MODELL **S66D**

MODELL **S67D**

MODELL **S68D**

Aufgrund der Kugelform eignen sich diese Spitzen für filigrane Korrekturen sowie für die Entfernung von Karies im zervikalen und interproximalen Bereich.

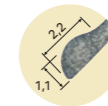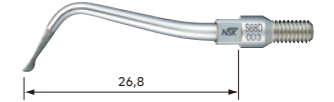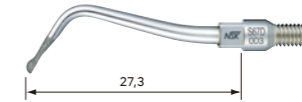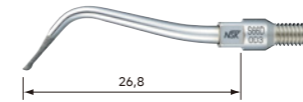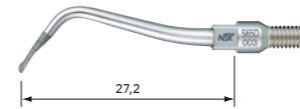

BESTELL CODE **Z252465**

BESTELL CODE **Z252466**

BESTELL CODE **Z252467**

BESTELL CODE **Z252468**

• Diamant-Beschichtung

• Diamant-Beschichtung


• Diamant-Beschichtung

• Diamant-Beschichtung




Entfernung von Karies im zervikalen und interproximalen Bereich.

RESTAURATIV

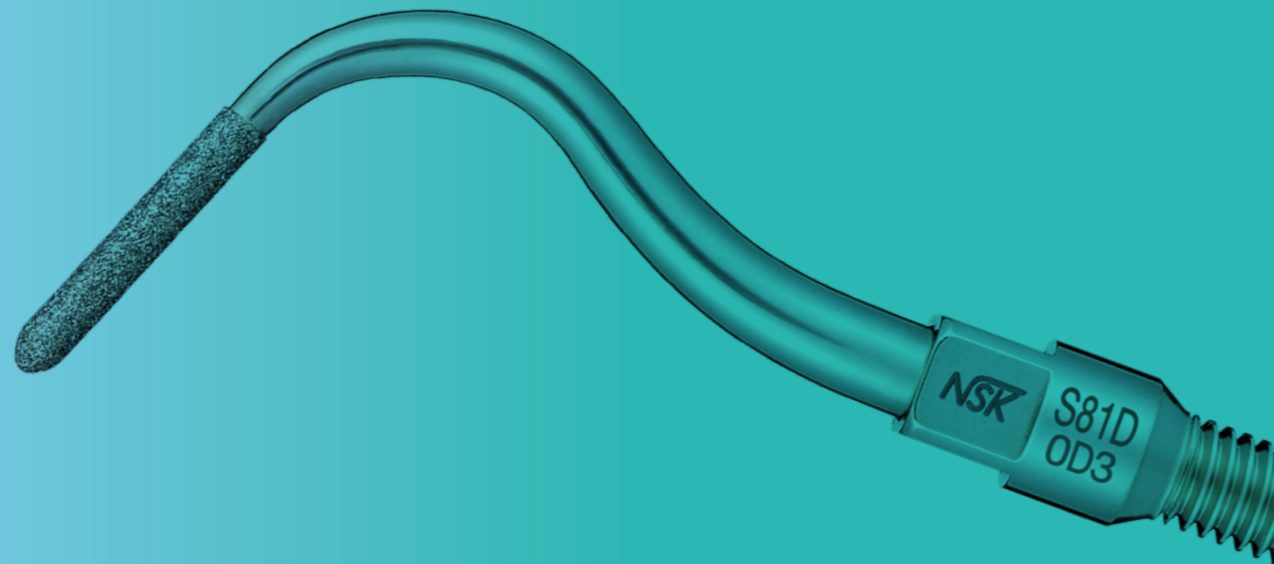



RESTAURATIV (Kronenrandpräparation)

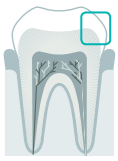

MODELL **S71D**

MODELL **S72D**

Diese Spitzen weisen eine diamantierte sowie eine undiamantierte, sichere Seite auf und sind für minimale mesiale oder distale Präparationen flach geformt.

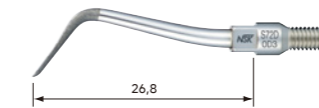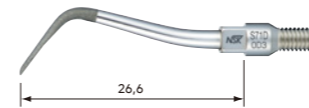


BESTELL CODE **Z252471**


BESTELL CODE **Z252472**

• Diamant-Beschichtung

• Diamant-Beschichtung

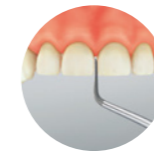

RESTAURATIV (Kronenrandpräparation)

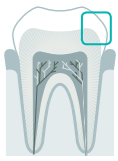







MODELL **S81D**

MODELL **S82D**

MODELL **S83D**

MODELL **S86D**

Diese Spitzen können für das Finishing der Kronenränder nach der Vorbereitung des Bereichs mit einem konventionellen Zahnbohrer verwendet werden. Sie ermöglichen die Feinbearbeitung von winzigen scharfen Kanten und Zahnfleischtaschen ohne Verletzung, was mit rotierenden Instrumenten alleine nicht gelingen kann.

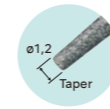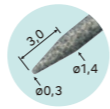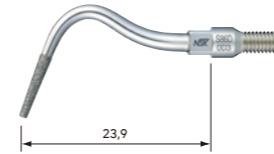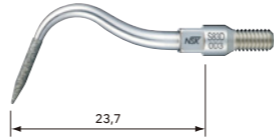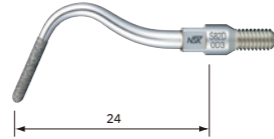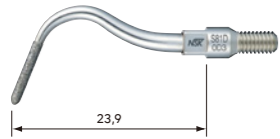

BESTELL CODE **Z252469**

BESTELL CODE **Z252462**

BESTELL CODE **Z252461**



BESTELL CODE **Z252460**


• Diamant-Beschichtung

• Diamant-Beschichtung

• Diamant-Beschichtung


• Diamant-Beschichtung

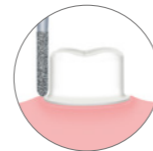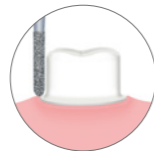

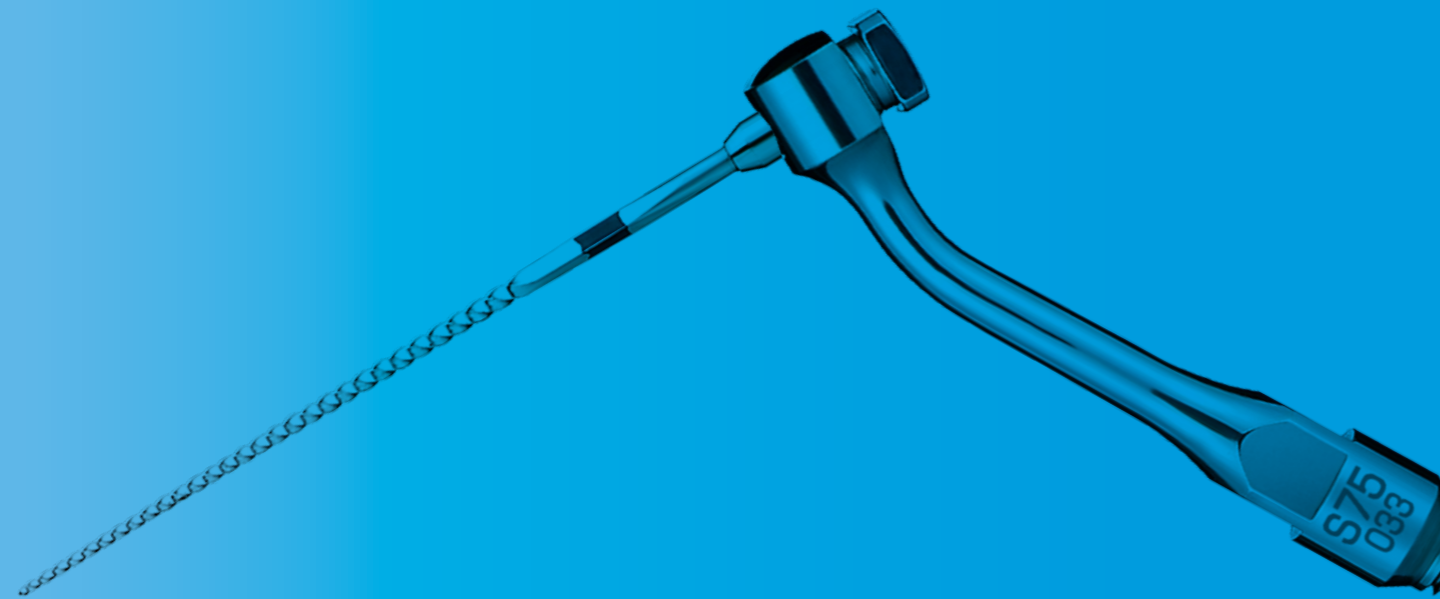


V-AUFSATZ SYSTEMREIHE

V-AUFSATZ SYSTEMREIHE

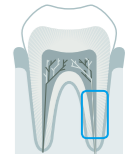

Das NSK V-Aufsatz-System ist innovativ, multifunktional und wirtschaftlich. Der V-Aufsatz-Halter ist eine separate Komponente für die tatsächlichen Arbeitsansätze und kann ganz einfach und kostengünstig ersetzt werden. Dieses System bietet eine hohe Flexibilität und Ausbaubarkeit und erfüllt eine Vielzahl unterschiedlichster Anforderungen.

MODELL **S75**

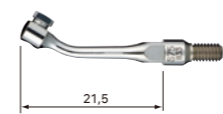


BESTELL CODE **Z252035**

• beinhaltet Schlüssel zum Wechseln der Aufsätze

V-AUFSATZ SYSTEMREIHE (Endodontie)




MODELL **V-U15**

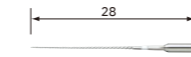

BESTELL CODE **Y900177**

• V-Feile23mm#15 • ISO15 • Packung à 6 St.


MODELL **V-U20**

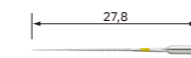

BESTELL CODE **Y900178**

• V-Feile23mm#20 • ISO15 • Packung à 6 St.


MODELL **V-U25**

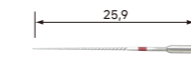

BESTELL CODE **Y900179**

• V-Feile23mm#25 • ISO25 • Packung à 6 St.


MODELL **V-U30**

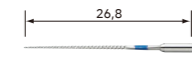

BESTELL CODE **Y900180**

• V-Feile23mm#30 • ISO30 • Packung à 6 St.

MODELL **V-U35**

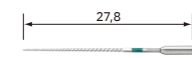

BESTELL CODE **Y900181**

• V-Feile23mm#35 • ISO35 • Packung à 6 St.



V-AUFSATZ

